



"Seitengitter"

→ Festgestellte Mängel müssen beseitigt werden!

Maße eines einteiligen Seitengitters

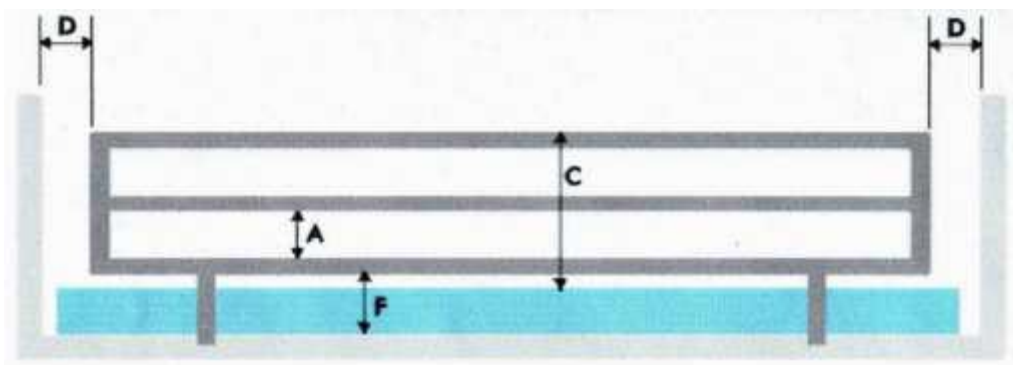

Maße eines unterteiligen Seitengitters

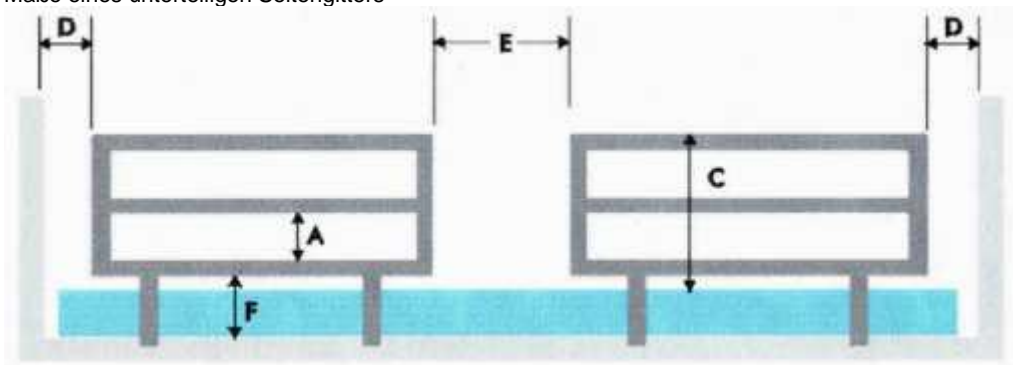

Bezeichnung	Maße	Anforderungen
A	Das größte Maß in mindestens einer Richtung zwischen Bestandteilen des Seitengitters/Haltegriffs in allen normal verwendeten Positionen.	$A \leq 120 \text{ mm}$
C	Höhe der Oberkante des Seitengitters über der Matratze ohne Kompression und dem Bettboden in ebener Position.	$C \geq 220 \text{ mm}$
D	Abstand zwischen Kopf-/Fußteil/Zubehör und Seitengitter/Haltegriff mit dem Bettboden in ebener Position. Gilt auch bei erweitertem Fußteil.	$D \leq 60 \text{ mm}$ oder $D \geq 250 \text{ mm}$
E	Abstand zwischen unterteilten Seitengittern mit dem Bettboden in ebener Position.	$E \leq 60 \text{ mm}$ oder $250 \leq E \leq 400 \text{ mm}$
F	Das größte Maß in mindestens einer Richtung jeder Öffnung unterhalb des Seitengitters entweder	falls $D \geq 250$; $F \leq 60 \text{ mm}$ falls $D \leq 60$; $F \leq 120 \text{ mm}$
G	Länge des/der Seitengitter(s)	$G \leq 2/3 H$